

ذكية خواتم الاستخدام تعليمات



【منصة متطلبات مطابقة】

التطبيق دعم * فوقها وما 14 الداخلية الرقابة دائرة  أندرويد 

【وظيفة مظهر المنتج وصف】

الاستشعار القلب ضربات معدل



الاستقبال منطقة شحن

معدل من واحد جانب من ، مناسبة مرونة مع ترتديه أن المستحسن فمن ، إصبعك على الذكية خاتم ارتداء : نصيحة . النخيل من الداخلي الجانب نحو الاستشعار القلب ضربات



【 مقدمة عمل حلقة 】

- 1 ثانية (1 الزمني الفاصل) مرات ثلاث الأخضر الضوء وميض ، بلوتوث اتصال : بلوتوث اتصال ، 1 (50ms الوقت ضوء على ،) .
2 . التلقائي التمهيد ، الكهربائي التيار قطع ، بالكامل مشحونة خاتم : التمهيد ،
3 . إيقاف تلقائيا الطاقة من % 5 من أقل : إيقاف ،
4 طول ضوء ، الأحمر الضوء وميض من اثنين بين دقيقة كل في الطاقة انخفاض : الطاقة وانخفاض ، 50ms
5 . أوتا التحكم معدات تطبيق دعم : الترقية أوتا ،
6 التطبيق في قياس دليل تعيين يمكنك ، واحدة مرة قياس ساعة 1 الافتراضي : القلب ضربات معدل قياس ،
7 . التطبيق في قياس دليل تعيين يمكن ، واحدة مرة قياس ساعة 1 الافتراضي : الدم ضغط قياس ،
8 . التطبيق في قياس دليل تعيين يمكنك ، واحدة مرة قياس ساعة 1 الافتراضي : الدم في الأوكسجين قياس ،
9 . 00 : 00-22 : 00 الزمنية الفترة عن الكشف : النوم قياس -
10 المتراكمة المعلومات إدارة ممارسة ، الأميال ، الخطوات عدد ، الحرارية السرعات : القياس ممارسة ،
11 حفظ التمرير أيام سبعة : التاريخية البيانات حفظ مدة ، 11 . تلقائيا صفر يوم كل ، اليوم طوال

【الاتصال طريقة تطبيق】



Lefun Health(Life)
يسمح أ يجب (Lefun Health(Life)
المحمول الهاتف باستخدام
(المستخدمة الوظائف

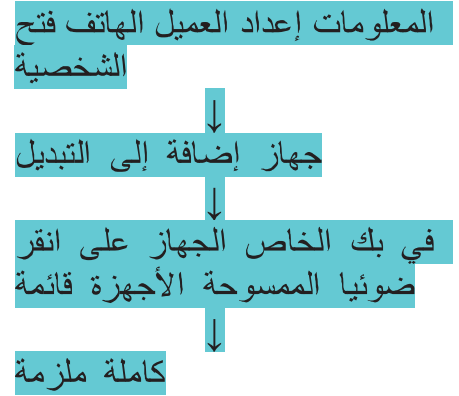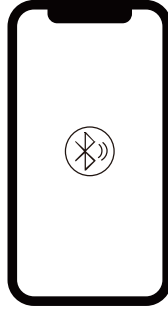

- 1 Lefun Health(Life) " المتجر التطبيق / الروبوت متجر في البحث أو ، أعلاه الأبعاد ثنائي رمز مسح ،
2 . التنشيط شحن ذكية حلقة استخدام قبل ، وتثبيت تحميل " .
3 أساس على الأجهزة عن التطبيق البحث " Lefun Health(Life) " والدخول فتح تهمة تفعيل بعد ،
الاقتتران استخدام " Smart Ring " حدد ، الاتصال معالج التطبيق

【 شحن طريقة 】

الضوء شحن عندما ، قاعدة على الذكية خاتم وضع ، المصنع من شحن خط استخدام إلى تحتاج شحن . مشرق الأحيان من كثير في الأخضر الضوء من والكامل ، مشرق دائما الأحمر .

【 التطبيق وظيفة مقدمة 】

- 1 . الشخصية المعلومات صفحة ، الصفحة ومعدات ، الرياضية الصفحة ، الرئيسية الصفحة ، 1 والمسافة ، الخطوات من عدد من الأقدام على سيرا يوم كل خاتم ارتداء للمستخدم وفقا : العد خطوة ، 2 أسبوع / يوم كل مع المستخدمين لتزويد ، الخرائط ورسم البيانات من الحرارية السرعات واستهلاك ، . المطلوبة البيانات العد خطوة شهر /
- 3 معدل التطبيق في حفظها سيتم مرة كل في البيانات قياس معدات : وحدة القلب ضربات معدل ، 3 معدات : الدم ضغط وحدة ، 4 . التفاصيل عرض المستخدم على السهل من ، التاريخ القلب ضربات المستخدم على السهل من ، التاريخ الدم ضغط التطبيق في حفظها سيتم مرة كل في البيانات قياس سيتم القياس بيانات مرة كل نهاية في المعدات : الدم في الأوكسجين وحدة ، 5 . التفاصيل عرض . التفاصيل عرض المستخدم على السهل من ، التاريخ الدم في الأوكسجين التطبيق في حفظها رسوم شكل في البيانات النوم الشهرية / الأسبوعية / اليومية المعلومات تسجيل : النوم وحدة - 6 . البيانات حلقة خلال من اليوم وطول النوم نوعية وحساب ، بيانية .

【 الأساسية المعايير 】

البليتوث	بلويتوث 5.0
البطارية نوع	البوليمر بطارية
البطارية قدرة	ماه 18
الشحن وقت	ساعة
الشحن طريقة	شحن مقعد
التعبئة	+ شحن خط المغناطيسي شفت + ذكية حلقة المنتج دليل

【 ملاحظة 】

البريد طريق عن مباشرة بنا الاتصال يرجى ، يفهم لا المنتج استخدام أو المنتج جودة في مشكلة هناك كان إذا ، 1 . بسرعة تتعامل وسوف ، الإلكتروني

الطبيب تعليمات اتباع يرجى . أساس و طبي استخدام أي وليس ، فقط كمرجع هو المنتج هذا من القياس نتائج ، 2 . القياس لهذا وفقا والعلاج الذاتي التشخيص تجعل لا و

بعضها عن تختلف الوظائف بعض . مسبق إشعار دون المواصفات هذه محتويات تعديل في بالحق الشركة تحتفظ - 3 . دائما الحال هو كما ، البرامج إصدارات في البعض

تمشيا ، المعدات اختبار تم ، المتحدة الولايات في الفدرالية الاتصالات لجنة قواعد من 15 المادة لأحكام وفقا ، 4 . الضار التدخل من معقولة حماية توفير إلى القيود هذه وتهدف . باء الفئة من الرقمية المعدات على المفروضة القيود مع تركيبها يتم لم إذا ، اللاسلكية الترددات الطاقة تشع أن ويمكن ، وتستخدم ، تنتج التي المعدات . السكنية المنشآت في ضمان يمكن لا ، ذلك ومع . اللاسلكية الاتصالات في ضارة اضطرابات يسبب أن يمكن ، للتعليمات وفقا واستخدامها ويمكن ، التلفزيون أو الإذاعة استقبال في ضاراً تدخلاً بالفعل يسبب الجهاز هذا كان وإذا . معين تركيب في التدخل عدم التدابير من أكثر أو واحد طريق عن التدخل هذا تصحيح محاولة على المستخدم يُشجّع ، تشغيله أو بإغلاقه تحديده التالية :

-- . الاستقبال هوائي توجيه إعادة أو توجيه إعادة --

-- . المتلقي و الجهاز بين المسافة زيادة --

-- المتلقي من مختلفة دارة على مقبس إلى الجهاز توصيل --